

## Matratzen Features

Der Matratzen-Kern setzt sich je nach Bedarf aus verschiedenen Auflagen und Härtegraden sowie unterschiedliche Dicken zusammen. Jede Einzelschicht ist dabei aus hochwertigem Schaumstoff.


Matratzenform




sauber  
eingearbeiteter und  
verdeckter  
Reissverschluss




hochwertiger,  
atmungsaktiver  
Überzug, blut- und  
urin-undurchlässig

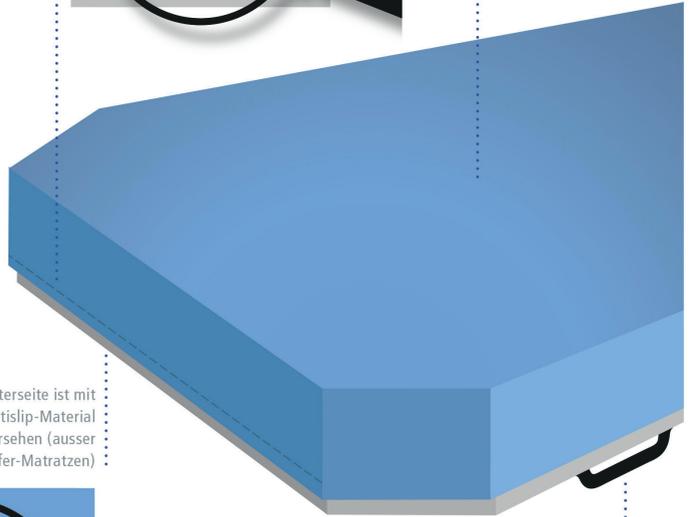

die Unterseite ist mit  
einem Antislip-Material  
versehen (ausser  
Transfer-Matratzen)

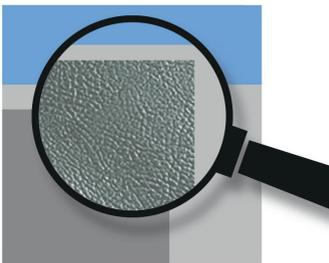

an den Seiten  
können optional  
Zugschlaufen  
angebracht  
werden

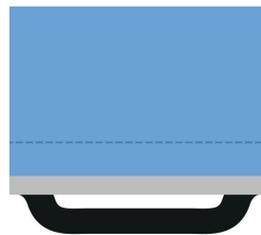

## Die Argumente für die HESS-Matratzen

Suchen Sie eine Polsterwerkstatt, welche nicht nur die Polster Ihrer Patientenliegen oder die Matratzen Ihrer Spital- oder Pflegebetten auf Vordermann bringt oder Polster und Matratzen nach Ihren Vorstellungen herstellt, sondern Ihnen für Ihre Patientenliegen und Matratzen einen echten Mehrwert bietet? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Unsere hauseigene Polsterwerkstatt beherrscht das Handwerk der Polstererei wie keine Zweite. In Kombination mit der Verarbeitung von qualitativ hochwertigen Materialien entsteht ein echter Mehrwert für Sie. Eine unserer Stärken sind individuell gestaltete Polster und Matratzen mit verschiedensten Überzügen oder Füllungen, die optimal Ihren Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen.

Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Reparaturarbeiten und Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen.

Warum sollen Sie sich für Matratzen der HESS Medizintechnik entscheiden?

### ✓ individuelle Fertigung

HESS Stretcher- und Transfer-Matratzen können auf Wunsch nach Ihren Vorgaben produziert werden

### ✓ langlebiger, fortschrittlicher Matratzenüberzug

Der Überzug besteht aus PUR (polyurethanbeschichtetes Nylongewebe). Polyurethan ist ein innovatives Material, das atmungsaktiv und trotzdem absolut dicht gegen Bakterien, Viren, Urin, Blut und weitere Flüssigkeiten ist. Durch die hohe Wischdesinfektionsfestigkeit bleibt der Überzug lange geschmeidig, zudem ist er Waschmaschinenfest bis 95°C und kann im Tumbler (60°C) getrocknet werden. Die bielastische Funktion des Überzugs verhindert Faltenbildung und gewährleistet optimale Weitergabe und Verteilung des Spitzendrucks an den Matratzen-Kern.

### ✓ Antislip-Material

Die Unterseite jeder HESS Transfer- und Stretcher-Matratze kann mit Antislip-Material versehen werden, um der Matratze einen besseren Halt auf dem Notfallstretcher zu verleihen.

### ✓ verschiedene Härtegrade

Sie können aus verschiedenen Härtegraden aussuchen, damit Sie Ihre Patienten jederzeit bequem lagern können. Auch ein längerer Aufenthalt auf der Matratze ist bequem.

### ✓ separater Überzug und Matratzenkern

Der innovative Überzug ist mit einem verdeckten Reissverschluss ausgerüstet. So können Sie den Matratzenüberzug oder den Matratzen-Kern separat auswechseln. Dadurch sparen Sie Kosten und Zeit.

### ✓ Sicherheit

Die Matratzen entsprechen einer der höchsten Brandschutzklassen (BS 7175: 1989 Crip 7) und sind nicht entflammbar. Polyurethanüberzüge (PUR) bleiben länger geschmeidig und somit dicht gegen das Eindringen von Körperflüssigkeiten in den Matratzen-Kern als PVC-Überzüge, die wesentlich schneller spröde werden.

### ✓ kurze Lieferzeit

alle HESS Stretcher- und Transfer-Matratzen sind innerhalb einer Woche bei Ihnen..



Schweizer Produkt



desinfektionsmittelbeständig



dicht gegen Körperflüssigkeiten



waschbar bis 95°C



tumblerbeständig bis 60°C




bewährte HESS Qualität



kurze Lieferfristen

# Stretcher-Matratze Komfort

## Härtegrad 2 (Standard)

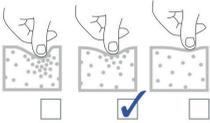


• Einfachkern  
• bis 7.5 cm

• Doppelkern  
• ab Matratzendicke 10 cm

## Patientengewicht



## Matratzenaufbau

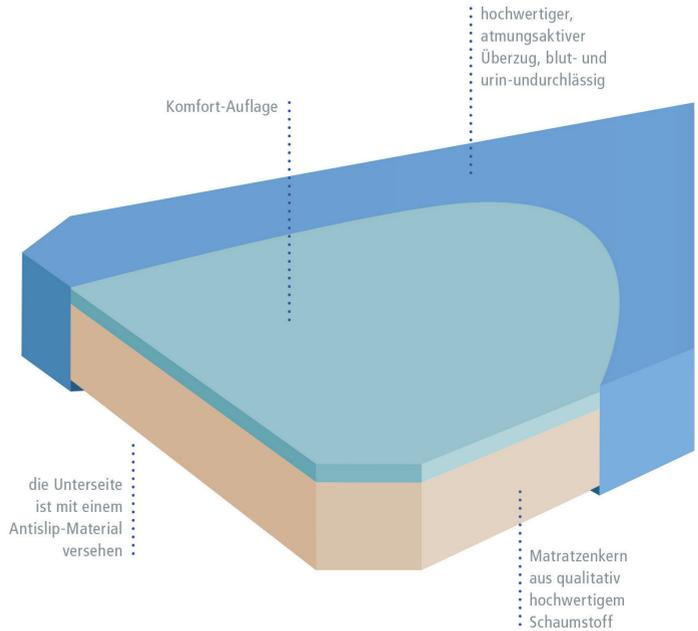


Angaben in cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Dicke
<b>ST-HE200.110</b>	Stretcher-Matratze Komfort	190	66	5
<b>ST-HE200.101</b>	Stretcher-Matratze Komfort	190	66	7.5
<b>ST-HE200.102</b>	Stretcher-Matratze Komfort	190	66	10
<b>ST-HE200.103</b>	Stretcher-Matratze Komfort	190	66	12.5
<b>ST-HE200.108</b>	Stretcher-Matratze Komfort	190	76	5
<b>ST-HE200.104</b>	Stretcher-Matratze Komfort	190	76	7.5
<b>ST-HE200.105</b>	Stretcher-Matratze Komfort	190	76	10
<b>ST-HE200.107</b>	Stretcher-Matratze Komfort (Überlänge)	203	76	10
<b>ST-HE200.106</b>	Stretcher-Matratze Komfort	190	76	12.5

Stretcher-Matratze Medium

Härtegrad 3

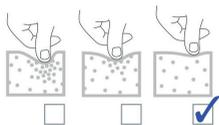


- Einfachkern
- bis 7.5 cm

Patientengewicht



Matratzenaufbau

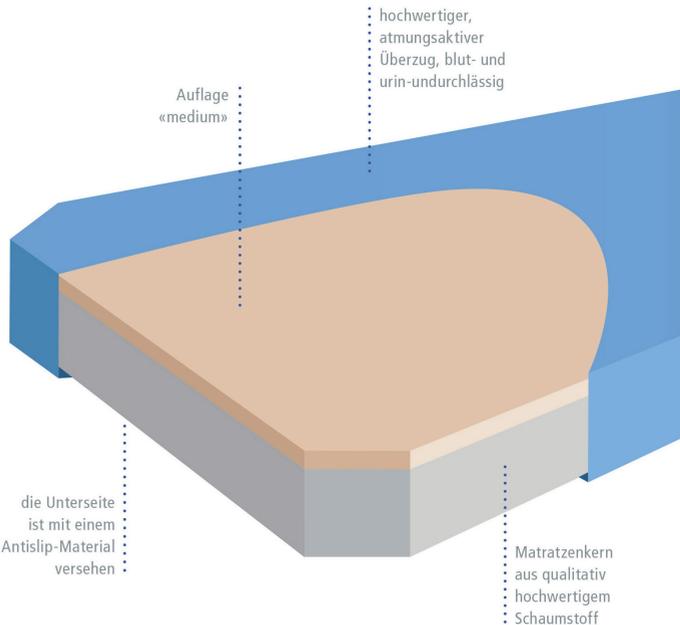


Angaben in cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Dicke
<b>ST-HE200.201</b>	Stretcher-Matratze Medium	190	66	7.5
<b>ST-HE200.202</b>	Stretcher-Matratze Medium	190	66	10
<b>ST-HE200.208</b>	Stretcher-Matratze Medium (Überlänge)	203	66	10
<b>ST-HE200.203</b>	Stretcher-Matratze Medium	190	66	12.5
<b>ST-HE200.204</b>	Stretcher-Matratze Medium	190	76	7.5
<b>ST-HE200.205</b>	Stretcher-Matratze Medium	190	76	10
<b>ST-HE200.207</b>	Stretcher-Matratze Medium (Überlänge)	203	76	10
<b>ST-HE200.206</b>	Stretcher-Matratze Medium	190	76	12.5

# Stretcher-Matratze Soft

## Härtegrad 1

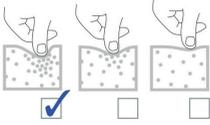



• **Einfachkern**  
• bis 7.5 cm

• **Doppelkern**  
• ab Matratzendicke 10 cm

## Patientengewicht



## Matratzenaufbau

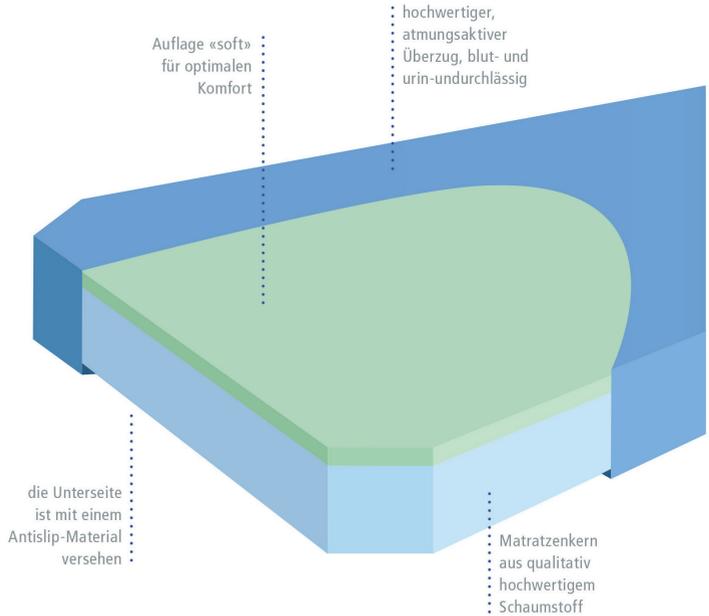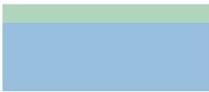


Angaben in cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Dicke
<b>ST-HE200.001</b>	Stretcher-Matratze Soft	190	66	7.5
<b>ST-HE200.002</b>	Stretcher-Matratze Soft	190	66	10
<b>ST-HE200.007</b>	Stretcher-Matratze Soft (Überlänge)	203	66	10
<b>ST-HE200.003</b>	Stretcher-Matratze Soft	190	66	12.5
<b>ST-HE200.004</b>	Stretcher-Matratze Soft	190	76	7.5
<b>ST-HE200.005</b>	Stretcher-Matratze Soft	190	76	10
<b>ST-HE200.008</b>	Stretcher-Matratze Soft (Überlänge)	203	76	10
<b>ST-HE200.006</b>	Stretcher-Matratze Soft	190	76	12.5

## Transfer-Matratze Komfort mit Zugschlaufen

Härtegrad 2

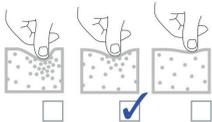


- Einfachkern
- bis 7.5 cm

- Doppelkern
- ab Matratzendicke 10 cm



Patientengewicht



Matratzenaufbau

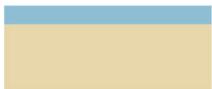

Zugschlaufen

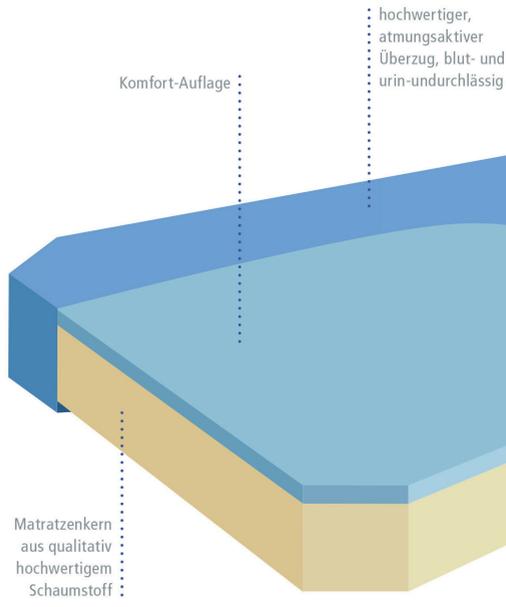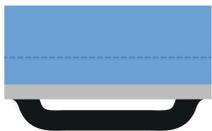

Angaben in cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Dicke
<b>ST-HE201.111</b>	Transfer-Matratze Komfort	190	66	5
<b>ST-HE201.112</b>	Transfer-Matratze Komfort	190	66	7.5
<b>ST-HE201.113</b>	Transfer-Matratze Komfort	190	66	10
<b>ST-HE201.102</b>	Transfer-Matratze Komfort	190	76	7.5
<b>ST-HE201.103</b>	Transfer-Matratze Komfort	190	76	10

## Zubehör

<b>ST-ML100-002</b>	HESS Matratzen-Sicherungssystem, Fixteil am Stretcher montiert
<b>ST-ML100-003</b>	HESS Matratzen-Sicherungssystem, Flauschband an der Matratze angenäht
<b>ST-K00035</b>	Aufpreis für 8 Zuggriffe an HESS Transfer-Matratzen
<b>ST-HE500</b>	Antislip für Transfermatratzen / für reduziertes Gleiten der Matratze

# Transfer-Matratze mSoft mit Zugschlaufen

mSoft-Härtegrad  
gewichtabhängig

Patientengewicht




Matratzenaufbau



Konstruktionsquerschnitt




Zugschlaufen

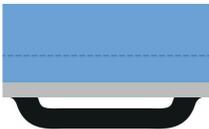

## Doppelkern mit mSoft-Schnitt.

Die Kombination unterschiedlicher Materialien mit speziellem Kernschnitt ermöglicht höchsten Liegekomfort für einen grossen Gewichtsbereich. Leichte Patienten liegen weich und bequem. Aber auch schwere Patienten werden dank des mSoft-Kernschnittes sehr gut abgestützt.

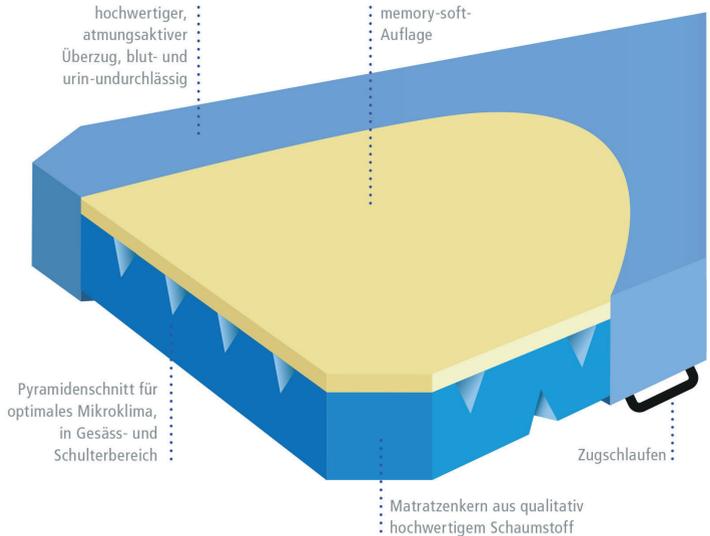

Angaben in cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Dicke
<b>ST-HE201.301</b>	Transfer-Matratze mSoft	190	66	7,5
<b>ST-HE201.302</b>	Transfer-Matratze mSoft	190	66	10
<b>ST-HE201.304</b>	Transfer-Matratze mSoft	190	76	7,5
<b>ST-HE201.305</b>	Transfer-Matratze mSoft	190	76	10

## Zubehör

<b>ST-ML100-002</b>	HESS Matratzen-Sicherungssystem, Fixteil am Stretcher montiert
<b>ST-ML100-003</b>	HESS Matratzen-Sicherungssystem, Flauschband an der Matratze angenäht
<b>ST-K00035</b>	Aufpreis für 8 Zugriffe an HESS Transfer-Matratzen
<b>ST-HE500</b>	Antislip für Transfermatratzen / für reduziertes Gleiten der Matratze