




### Hygiene ist uns wichtig - Ihnen auch?

HESS MediPad - Das Schweizer Polstersystem für die HESS Patientenliegen, speziell entwickelt für den Einsatz in Spitälern und in Praxen. Das intelligente Zusammenspiel von qualitativ hochwertigen Materialien und einer hervorragenden Verarbeitung ergeben Eigenschaften die ihresgleichen suchen.

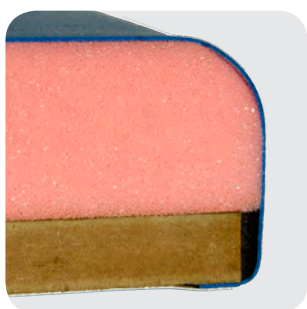

Der Aufbau des Polsters besteht aus fünf hochwertigen Komponenten. Basis bildet eine stabile Trägerplatte, die dem Polster die nötige Stabilität und Sicherheit verleiht. Darauf wird ein latexfreier Schaumstoffkern verklebt, der dem Patienten den nötigen Komfort gibt. Die Trägerplatte wird mit einem stossabfangenden Band umrandet. Diese Randzonenverstärkung verhindert Kanten oder Druckstellen. Das ganze Innenleben wird nun mit dem medizinischen Kunstleder überzogen und auf der Unterseite mit einer dichten Folie verschweisst. Das Kunstleder besitzt eine bakterien- und schimmelpilzabweisende Oberflächenbehandlung (Sanitized) und ist absolut dicht gegen Flüssigkeiten. So können kein Blut, Urin oder sonstige Flüssigkeiten in den Polsterkern eindringen.



keine Verletzungsgefahr, da das Polster nicht getackert wird, sondern verschweisst. So entstehen keine Falten, wo sich Schmutz und Mikroben absetzen und sammeln können. Dadurch ist es einfach und schnell zu reinigen.



Der Polsterüberzug wird nahtlos über den Kern gezogen. Diese nahtlose Verarbeitung verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in den Polsterkern.



Randzonenverstärkungen verhindern schmerzhaftes Kanten beim Aufsitzen oder Absteigen von der Patientenliege MultiPro®.

Diese Vorteile bietet Ihnen nur das HESS MediPad Polstersystem. Hochwertige Verarbeitung nach schweizer Qualität ist bei uns garantiert.

**HESS MediPad Polstersystem ist hygienisch einwandfrei!**