

dialysis.



MULTILINE NEXT DC. THERAPIELIEGE FÜR DIALYSE UND CHEMOTHERAPIE.

 **GREINER**

dialysis.



GREINER MEDBEST – MEDIZINTECHNIK MADE IN GERMANY.

GREINER stellt sich der Herausforderung, aus Wünschen von Patienten und Pflegepersonal innovative Lösungen zu entwickeln, die klinischen und wirtschaftlichen Anforderungen gleichermaßen gerecht werden. Made by GREINER heißt Made in Germany. Seit den 1970er Jahren bietet GREINER medbest Produkte für den medizinischen Bereich. Entwicklung und Produktion der GREINER Liegen bis hin zum Serviceangebot orientieren sich konsequent am Premiumanspruch. Dabei stützen wir uns auf Innovationsgeist, umgesetzt in vollautomatisierten Prozessen und qualifizierter Handarbeit. Hoher Anspruch in Design, Material, Technik und Ergonomie, kombiniert mit kundenorientierter Flexibilität, macht GREINER zum Partner qualitätsbewusster Kunden auf Spitzenniveau.

ZEIT FÜR EINE NEUE LIEGENGENERATION.

Dialyse stellt ohne Zweifel eine der anspruchsvollsten Behandlungsformen für Patienten und Pflegeteam dar. Die sehr unterschiedlichen, teils hochgradig ausgeprägten Krankheitsbilder bei Menschen mit chronischem Nierenversagen gehen einher mit individuell stark differierenden Bedingungen bei Größe und Gewicht, Alter und Gesundheitszustand. Gravierende Voraussetzungen sowie eine Behandlungsdauer über viele Stunden – eine große Herausforderung für Komfort und Sicherheit der Dialyseliege. Zeit für die neue GREINER MULTILINE NEXT DC.

MULTILINE NEXT DC.

GREINER präsentiert mit der MULTILINE NEXT DC eine technologisch völlig neu entwickelte Liege für Klinik und Praxis. Sie erfüllt die speziellen Anforderungen der Dialyse. Eine extra weiche Polsterung und ebenso angenehme wie strapazierfähige Bezüge sorgen für höchsten Patientenkomfort. Glatte Oberflächen und aufs Minimum reduzierte Nähte optimieren zugleich die Hygienebedingungen. Die innovativen 5-Punkt-Armauflagen setzen Maßstäbe bei der Therapie. Und leistungsfähige Elektromotoren bringen Patienten sanft und stufenlos in die beste Sitz- und Liegeposition – bis zur Trendelenburglagerung im Notfall.

GREINER in der Dialyse:

- ◆ Vollständig neues Konzept in Design, Technologie und Leistung, Modellvarianten mit 3-5 Motoren, mit und ohne Zentralarretierung
- ◆ Elektromotorische Verstellung von Rücken-, Sitz- und Beinteil, Höhenhub sowie Fußstütze mit schnellen, leisen und sicheren Bewegungen
- ◆ Komfortable weiche Polsterung, Sitz- und Liegekomfort auf höchstem Niveau über viele Stunden
- ◆ Perfekte Ergonomie durch niedrige Einstiegshöhe, breite Liegefläche, innovative 5-Punkt-Armauflagen und große Doppel-Lenkrollen
- ◆ Zuverlässige und von unabhängiger Stelle zertifizierte Produktsicherheit



Sitzposition



Relaxposition



Bettposition/Flachlage



Trendelenburg- und Schockposition

GREINER Handschalter mit intelligenter Bedienführung: Einfache, international verständliche Symbole, Tasten mit hilfreichen und notfallgerechten Grundeinstellungen für Sitz-, Relax-, Bett- und Trendelenburgposition sowie die Einstellung von Höhe und Fußstütze. Sicherheit durch Magnetschlüssel-Sperre.



MULTILINE NEXT DC. DIALYSE-THERAPIELIEGE.

Auf Basis der Auswertung aktuellster Erkenntnisse aus dem Gesundheitswesen und einem intensiven Austausch mit Dialysezentren im In- und Ausland hat GREINER eine ganz neue Generation von Therapieliegen für die Dialyse entwickelt. Patientenkomfort, Ergonomie und Effizienz stehen im Mittelpunkt, wenn diese Liegen der Herausforderung begegnen, die stundenlang andauernde Blutwäsche auf ein angenehmeres und damit behandlungsaffineres Niveau zu heben. An den Liegen zeigt sich dieser Anspruch in einem neuen weichen Polstermaterial, komfortabel über Stunden und mit besten Hygienebedingungen, zügig und stufenlos motorisierten Bewegungsabläufen in die gewünschte Position, sowie einer deutlich flexibleren und patientengerechteren Ergonomie der 5-Punkt-Armauflage.

Komfort, Funktionalität und Ergonomie.

Stufenlos motorisch einstellbar, gleichermaßen intelligent wie einfach zu bedienen über die Wahl- und Steuertasten des GREINER Bedienelements: Die MULTILINE NEXT DC mit 3, 4 oder 5 Motoren bietet hohen Sitz- und Liegekomfort in jeder Lage. Von der Sitz-, Relax- und Bettposition bis zur notfallgerechten Trendelenburglagerung verfährt die Liege schnell und sanft per Tastendruck in jede gewünschte oder erforderliche Position.

Das GREINER Designkonzept macht es Pflegern wie Patienten leicht, die leistungsfähigen Motoren für Rücken-, Sitz-, Beinteil und Fußstütze sowie den Höhenhub ab einer Einstiegshöhe von 54-56 cm effizient zu nutzen. Mobil, stabil und sicher.




MULTILINE NEXT DC. NEUER KOMFORT FÜR DIE DIALYSE.


Bei GREINER können Sie Behandlungsliegen maßgerecht für Ihre Erfordernisse ausstatten. Bezug und Polster wählen Sie ganz individuell. Premium Bezugsstoff und Polsterung bietet extra weiche, strapazierfähige Oberflächen und unterstützt durch ein elastisch-dynamisches Federsystem im Sitzteil die physiologische Bewegungsfreiheit von Wirbelsäule, Becken und Hüfte. Mit der Folge von angenehmer Druckentlastung für die Patienten. Ebenso setzen die innovativen MULTILINE 5-Punkt-Armauflagen Maßstäbe, weil sie erstmals in 5 Richtungen bewegt werden können.



Niedriger Einstieg je nach Modell ab einer Höhe von 54 cm

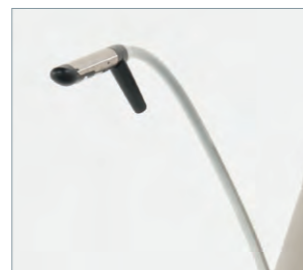

LED-Leselampe

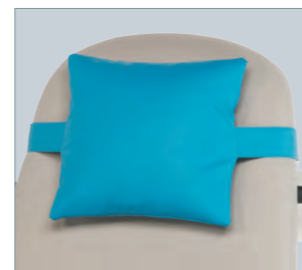

Relax-Kissen als Standard



Papierrollenhalter im Schiebebügel



Zentrales Bremssystem




5-Punkt-Armauflagen gepolstert mit angehängter Fernbedienung



Integralschaum-Armauflagen



Notfall-Fußschalter

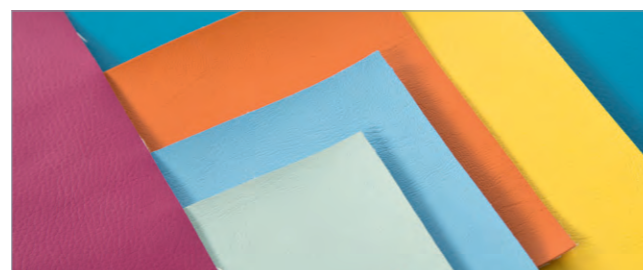

Vielfältige Farbvarianten in den Bezugsstoffen compact und premium.



Produktsicherheit
GREINER Behandlungsliegen sind von unabhängiger Stelle geprüft und zertifiziert.

Ergonomie

Innovative Armstützentechnik mit patientengerechter Positionierung in Höhe, Neigung, Richtung und Volumen, Anpassung an Rumpfbreite



Fußstütze

Mit patientengerecht automatischem Längenausgleich, abnehmbar

Farben und Zubehör

Umfassendes Programm mit vielfältigen Ausstattungsvarianten

Hygiene

Einhaltung schärfster Richtlinien, perfekter Zugang, sauberer Flächenabschluss, geprüfte Oberflächen, Minimum an Nähten

Sitz- und Liegekomfort

Extra komfortable Polsterauflage mit breiter Sitzfläche (60 cm), von Hand verarbeitet

Zugang

Einstieghöhe je nach Modell und Ausstattung ab 54 cm

Patientenwaage

Innovation-ready-Ausstattung für integrierte Waage

Mobilität und Bremsen

10-cm-Doppel-Lenkrollen, wahlweise mit Zentralarretierung

MULTILINE NEXT DC – Ausstattung / Zubehör

- Dialyseliege 3-5 Motoren mit/ohne Zentralarretierung, Relax-Kissen, Integralschaum-Armauflagen

Zubehör

- LED-Leselampe
- Schonbezug Beinteil/Fußstütze
- Akku
- Schiebebügel mit Papierrollenhalter
- Gepolsterte Armauflagen
- Verkürzte Fußstütze
- Infusionsstangenhalter, schwenkbar, Einhand-Bedienung
- Infusionsstange
- Normschienen
- Premium Polster-Bezugsstoff
- Sitz mit druckentlastenden Federn
- Fußschalter/Notschalter

Maße und technische Daten

- Stuhlposition (Stellfläche) 148 x 80 cm
- Liegeposition (Stellfläche) 230 x 80 cm (Fußstützenendposition)
- Gesamtbreite 80 cm
- Liegefläche (L x B) 220 x 60 cm
- Stärke Liegefläche 9 cm
- Armlehne (L x B) 58 x 13 cm
- Einstieghöhe 54 cm
- Höhenverstellung 21 cm (54 – 75 cm)
- Rollendurchmesser 10 cm
- Rücken - 5° bis 78°
- Sitzteil 0° bis 22°
- Beinteil - 25° bis 0°
- Fußstützeverfahrweg 25 cm
- Maximales Patientengewicht 220 kg
- Spannung 230 V/50-60 Hz, 110 V/50-60 Hz
- Gewicht Liegen 105 – 110 kg



we design quality.

Die Freude am gesunden und angenehmen Sitzen treibt uns seit 1922 an. Seit vielen Jahrzehnten auch mit qualitativ und technisch hochwertigen Liegen im Bereich medbest: Innovative Entwicklungen „made in Germany“ für Untersuchung, Dialyse, Onkologie, Blutabnahme, Pflege und Transport. Bestätigt wird unser Qualitätsversprechen durch ein unabhängig geprüftes Qualitätssicherungssystem – GREINER ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 13485.



Prüfzeichen für
Qualitätsmanagement-System



Prüfzeichen für
Produktzertifizierung



GREINER GmbH
Wettestraße 1 · 74385 Pleidelsheim · Germany
T +49 7144 81120 · F +49 7144 8112 99
info@greiner-gmbh.de · www.greiner-gmbh.de

