

# medseat.



**MEDSEAT ELEKTRISCH.  
DER FÜHRENDE HNO-BEHANDLUNGSSTUHL – NEU MIT DEM ERGO-PLUS.**



# GREINER



# medseat.



## PERMANENTE WEITERENTWICKLUNG MIT ERGONOMIE IN VIELEN DETAILS.

Die neue Generation des GREINER medseat kommt Ihrer behandlerischen Individualität so weit entgegen wie noch nie: Denn jetzt konfigurieren Sie Ihren Behandlungsstuhl selbst in Verbindung mit der Kopf- und Fußstütze Ihrer Wahl.

Beispielsweise entscheiden Sie maßgeschneidert zu Ihrer Anwendung, ob Sie ein synchron mitlaufendes Beinteil mit geführter Ergo-Trittplatte und die Kopfstütze Ergo wünschen, ob Sie dort das Vario-Doppelgelenk mit sicherem Halt benötigen oder auch, ob Sie lieber mit Fußschalter oder Handschalter in der Rückenlehne arbeiten. Bei häufigem Wechsel von Patientenlagerung und Positionierung ist die optionale Quick Assist Schnellkupplung für Kopfstütze, Halb- oder Vollkalotte eine sehr ergonomische und effiziente Lösung. Diese Varianten skizzieren nur einen Ausschnitt Ihrer Möglichkeiten, neben der Wahl von Farben und Bezügen sowie weitreichendem Zubehör. medseat ist ein Klassiker, der mit neuen Ideen immer jung bleibt.

### MEDSEAT ELEKTRISCH – Behandlungsstuhl für HNO und mehr.

- medseat mit elektrischer oder manueller Synchronverstellung des Oberteils
- medseat mit elektrisch separater Verstellung von Rückenlehne und Beinteil
- medseat fahrbar mit elektrischer oder manueller Synchronverstellung des Oberteils
- medseat fahrbar mit elektrisch separater Verstellung von Rückenlehne und Beinteil
- Alle synchron verstellbaren Modelle wählbar mit Fußschalter oder Handschalter in der Rückenlehne, konfigurierbar mit Kopf- und Fußstütze nach Wahl
- Alle separat verstellbaren Modelle mit Handschalter in der Rückenlehne und Kopfstütze Ergo

#### Anwendungen

- Ergonomischer HNO-Behandlungsstuhl für Klinik und Praxis
- Flexibler Zahnarzt-Behandlungsstuhl für den digitalen Workflow
- Praktische Lösung für Abdrucknahme und Prothetikanprobe in KFO-Praxen und Labors
- Klinischer Behandlungsstuhl für Oral- und plastische Chirurgie
- Podologie-Behandlungsstuhl – mit getrenntem Beinteil



Sitzfläche um 90° nach rechts und links drehbar (Option), an jeder Position feststellbar



Behandlung und OP in Flachlage, sitzend in 12-Uhr-Position

## DAS ERGONOMIE-PLUS HEBT DIE BEHANDLUNGSQUALITÄT AUF EIN NEUES NIVEAU.

medseat mit seinen zahlreichen Varianten ist der beliebteste Behandlungsstuhl in HNO-Praxen weltweit. Das Vertrauen vieler Behandlerinnen und Behandler hat er durch seine Fähigkeit gewonnen, hohe Flexibilität und Variabilität in robuster Form mit einfacher Bedienung zu präsentieren. Generation für Generation wurde er weiterentwickelt. Heute, angesichts wachsender Behandlungsumfänge in der Praxis, wächst auch der Bedarf an Ergonomie für Arzt und Patient. Dabei geht es um weit mehr als aufrechtes Sitzen, entspanntes Liegen oder die gesunde Haltung für ärztliche Diagnostik und Behandlung. Viel mehr rückt die Ausstattung des Behandlungsstuhls mit ergonomisch beweglicher Trittplatte und flexiblen Kopfstützen in den Mittelpunkt.

medseat ist ein kompakter Allrounder. Er braucht wenig Platz, eignet sich für Untersuchung, Beratung und Behandlung bis hin zu chirurgischen Maßnahmen. In HNO-Praxen ist er integrativer Bestandteil vieler Praxislösungen. Er kommt aber auch in Zahnarzt-, KFO- oder Oralchirurgie-Praxen sowie in der plastischen Chirurgie zum Einsatz.



**Ergonomie**  
Ergonomie ist ein Thema, das bei GREINER traditionell eine elementare Bedeutung in der Produktentwicklung, Konstruktion und im Qualitätsmanagement besitzt. Der Innovationspreis 2020 des Instituts für Gesundheit und Ergonomie in Nürnberg (IGR) bestätigt jetzt das konsequente Engagement von GREINER medbest auf diesem Feld.



Kopfstütze Ergo als Standard kann handlich getauscht werden.



Kopfstütze Ergo mit Vario-Doppelgelenk und Quick Assist Kupplung




Schnelle und handliche Positionierung – einzigartige Gelenkfixierung



Fußstütze klappbar, optisch perfekt ins Beinteil integriert



Jede Position mit Kopfstütze Ergo, Halb- oder Vollkalotte fixierbar

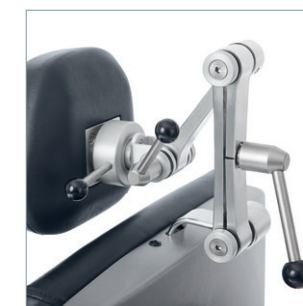

Einsatz des Vario-Doppelgelenks



Schneller Wechsel mit Quick Assist Schnellkupplung



Bei Synchronverstellung bewegt sich die Trittplatte ergonomisch mit



**Oberfläche**  
Einhaltung hygienischer Richtlinien, sauberer Flächenabschluss, Bezugsmaterialien Compact und Premium in vielen Farben

**Fixierung**  
Kopfstützen nach Wahl: Ergo, ohne/mit Vario-Doppelgelenk, Quick Assist Schnellkupplung, Wechsepolster sowie Voll- und Halbkalotte für Quick Assist

**Zugang**  
Oberteil um 330° drehbar und an jeder Position fixierbar, optional zusätzlich 90° rechts/links drehbares Sitzpolster, Höhenhub von 59 - 89 cm, Armauflagen hochklappbar

**Flexibilität**  
Ausstattung mit oder ohne Handschalter eingelassen ins Rückenteil

**Sitz- und Liegekomfort**  
Elektrische Liegeflächenverstellung synchron von Rücken- und Beinteil oder auch separat

**Stabilität**  
Sicheres Handling bis 200 kg Patientengewicht

**Fußstütze mit klappbarer Trittplatte**  
Einzigartig ergonomische Lösung, die bei der Synchronverstellung die Trittplatte mit bewegt

**Steuerung**  
Ausstattung nach Wahl mit Fußschalter für Frei-Hand-Einstellung von Rücken- und Beinteil

**Mobilität**  
Unterteil auf Praxisboden beweglich, Auslösung mit Fußpedal, oder wahlweise fix



#### MEDSEAT – Zubehör

- ◆ medseat in Premium Bezugsmaterial
- ◆ Elektrisch leitende Bezüge (nur in Schwarz)
- ◆ Kopfstütze Ergo
- ◆ Kopfstütze Ergo mit Vario-Doppelgelenk
- ◆ Quick Assist Schnellkupplung
- ◆ Wechsepolster für Quick Assist
- ◆ Vollkalotte für Quick Assist
- ◆ Halbkalotte für Quick Assist
- ◆ Drehbare Sitzfläche 90° rechts/links
- ◆ Kindersitzauflage
- ◆ Klarsichtschutz Beinauflage
- ◆ Fußstütze synchron mit Trittplatte oder integrierter Ergo-Trittplatte klappbar
- ◆ Fußstütze fix mit fester oder klappbarer Trittplatte
- ◆ Fußstütze Bügel
- ◆ Podologie Beinstütze

#### Maße und technische Daten

◆ Sitzbreite	53 cm
◆ Sitztiefe	44 cm
◆ Sitzposition	84 x 70 cm
◆ Liegeposition	198 x 70 cm
◆ Gesamthöhe	135 – 165 cm
◆ Gesamtbreite	70 cm
◆ Liegefläche (Flachlage) mit Beinauflage	198 x 70 cm
◆ Liegefläche (Flachlage) ohne Beinauflage	178 x 70 cm
◆ Sitz-/Liegehöhe	59 – 89 cm
◆ Rückenneigung bis in die Flachlage	
◆ Anschluß	230 V/50-60 Hz
◆ Maximales Patientengewicht	200 kg
◆ Gewicht	55 – 108 kg



# GREINER

GREINER GmbH  
Wettestraße 1 · 74385 Pleidelsheim · Germany  
T +49 7144 81120 · F +49 7144 8112 99  
info@greiner-gmbh.de · www.greiner-gmbh.de