



HESS Patientenstretcher Orion®



H12-100 / H12-101 / H12-102 / H12-103

Patientenstretcher Orion®

Zwei Antriebe. Eine Lösung.

 qualitativ hochwertiges Schweizer Produkt

 «HESS plus» 3 Jahre Garantie

 ergonomisch

 Service

 CE-Konform

 Polster wasserdicht

 Schwerbrennbarkeit nach DIN 53438

Der Orion® Patientenstretcher vereint durchdachte Technik, hohe Belastbarkeit und müheloses Handling für den anspruchsvollen Klinikalltag. Das ergonomisch verstellbare Rückenteil nutzt Gasdruckfedern und das Eigengewicht des Patienten für eine kraftsparende Bedienung. Dank seiner stabilen Konstruktion trägt der Stretcher bis zu 320 kg. Grosse 200 mm Rollen und ein zuschaltbares fünftes Rad sorgen für hervorragende Manövrierbarkeit und spürbare Entlastung für das medizinische Personal.

Durch den modularen Aufbau passt sich der Orion® individuell an Ihre Bedürfnisse an. Für mehr Effizienz, Sicherheit und Komfort.

In 4 verschiedenen Konfigurationen verfügbar

- H12-100 Patientenstretcher Orion® 66 – hydraulisch
- H12-101 Patientenstretcher Orion® 77 – hydraulisch
- H12-102 Patientenstretcher eOrion® 66 – elektrisch
- H12-103 Patientenstretcher Orion® 77 – elektrisch

Basisausstattung für alle Modelle
Bremssystem an Kopf- und Fussende
Sauerstoffflaschenhalterung 2/3/5/8/11 Liter
Höhenverstellung auf beiden Seiten
Einstecklöcher für Zubehör an allen 4 Ecken
320kg sichere Arbeitslast
Einzellenkrollen Ø 200 mm
Trend./Anti-Trend. 16°
Seitengitter ohne Klemmstellen
Wandabweiser
Verstellbereich Rückenteil 0 - 64°
5th-Wheel
Fahrwerk mit richtungsfeststellender Rolle



Trend- / Anti-Trendelenburg



Seitengitter



Bremssystem / 5th-Wheel



H12-100 / H12-101

Patientenstretcher Orion®

Der Hydraulik-Stretcher für höchste Ansprüche

vier integrierte
Infusionsständerhalterungen

intuitiv bedienbare Rückenlehne mit
Schwerkraft- und Gasfederunterstützung
kontrollierte und feinjustierte Absenkhydrau-
lik für präzise und gewichtsunabhängig
Absenkgeschwindigkeit

abklappbare Seitengitter
für optimalen Patiententransfer

zentral verriegelndes
Bremssystem an allen
vier Laufrollen

Fusspedal
beidseitig

ø 200 mm Einzellenkrollen
für beste Mobilität

intuitive Ablassung

5th-Wheel – optimale Manövrier-
barkeit durch ein zusätzliches Rad

Basisausstattung	H12-100	H12-101
Höhenverstellbereich 55 - 87 cm	●	●
Gesamtmasse 208.5 x 74 cm	●	
Gesamtmasse 208.5 x 80 cm		●

H12-102 / H12-103

Patientenstretcher eOrion®

Der elektrische Patientenstretcher der nächsten Generation

vier integrierte
Infusionsständerhalterungen

intuitiv bedienbare Rückenlehne mit
Schwerkraft- und Gasfederunterstützung,
kontrollierte und feinjustierte Absenkhydrau-
lik für präzise und gewichtsunabhängige
Absenkgeschwindigkeit

abklappbare Seitengitter
für optimalen Patiententransfer

zentral verriegelndes
Bremssystem an allen
vier Laufrollen

ø 200 mm Einzellenkrollen
für beste Mobilität

Trend- / Antitrendelenburglage
mittels elektrischen Fusstasten

5th-Wheel – optimale Manövrier-
barkeit durch ein zusätzliches Rad

Höhenverstellung mittels
elektrischen Fusstasten


Basisausstattung	H12-102	H12-103
Höhenverstellbereich 60 - 92 cm	●	●
Gesamtmasse 208.5 x 74 cm	●	
Gesamtmasse 208.5 x 80 cm		●

Optionen und Zubehör




H12-500.036
Zweiteilige Liegefläche für 66 cm

H12-500.037
für 77 cm

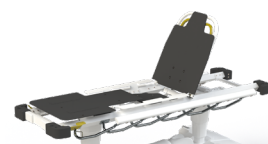

H12-500.002
Dreiteilige Liegefläche für 66 cm

H12-500.004
für 77 cm

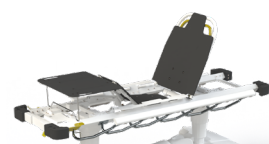


H12-500.005
Vierteilige Liegefläche für 66 cm

H12-500.006
für 77 cm




H12-500.040
Zweiteilige röntgenfähige Liegefläche für 66 cm


H12-500.041
für 77 cm

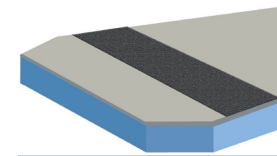


ST-HE500
Antislip für Transfermatratzen

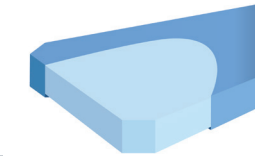


ST-HE200.0...
Stretchermatratze Soft

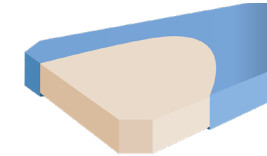

ST-HE200.1...
Stretchermatratze Komfort

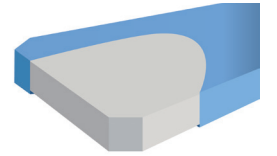


STHE200.2...
Stretchermatratze Medium

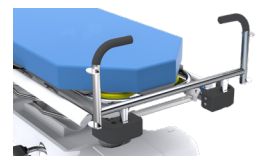

H12-500.038
Klingler-Adapter Kopfseite 66 cm

H12-500.039
für 77 cm

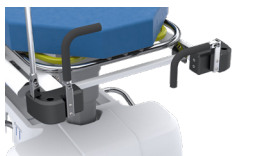

H12-500.024
Klappbarer Schiebegriff am Fussende

H12-500.016
am Kopfende



H12-500.019
Papierrollenhalter Kopfseite 66 cm

H12-500.020
für 77 cm



H12-500.021
Normschiene 10 x 25 mm Kopfseite 66 cm


H12-500.022
für 77 cm



H12-500.027
Matratzensicherungs-System



ST-K00035
Aufpreis für 8 Zugriffe

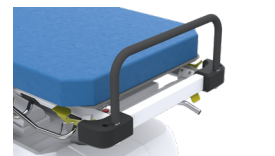

H12-500.026
Fester Schiebegriff am Fussende

H12-500.018
am Kopfende



H12-500.029
Fussbrett für Orion® 66 cm

H12-500.018
für 77 cm



H12-500.012
Zusätzliche Fusssteuerhydraulik am Fussende

H12-500.013
am Kopfende



H12-500.015
Fussseitiges Pumpedal



H12-500.008
4-Seitiges Bremssystem



H06-561.003
Infusionsstativ abnehmbar, fixe Höhe



H12-500.031
Infusionsstativ, Kopfseite links

H12-500.032
Kopfseitig rechts


H12-500.033
Fussseitig rechts

H12-500.034
Fussseitig links




Technische Daten


HESS Patientenstretcher Orion® 66/77 – zweiteilige Liegefläche

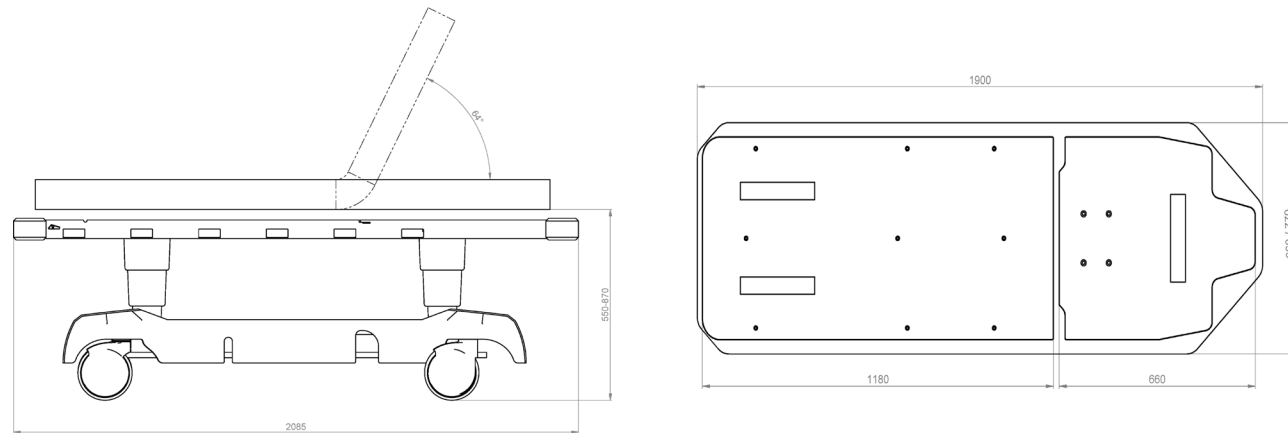


HESS Patientenstretcher Orion® 66/77 – röntgenfähige Liegefläche

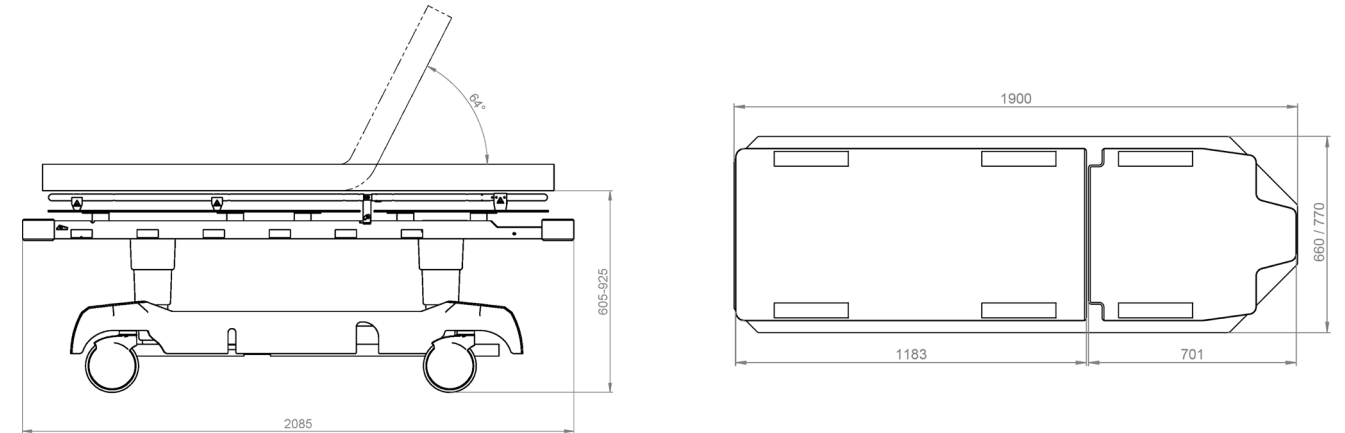

HESS Patientenstretcher Orion® 66/77 – dreiteilige Liegefläche

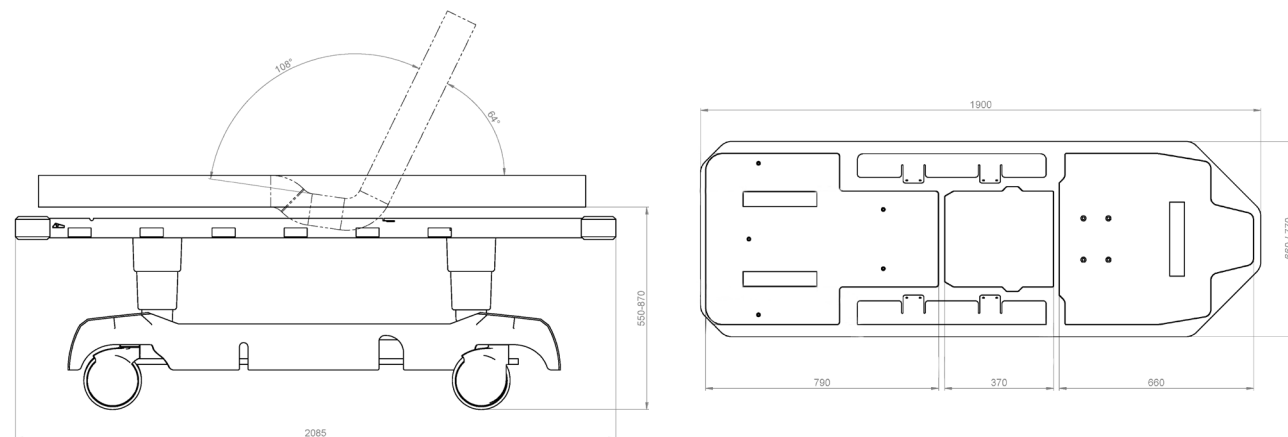

HESS Patientenstretcher Orion® 66/77 – vierteilige Liegefläche

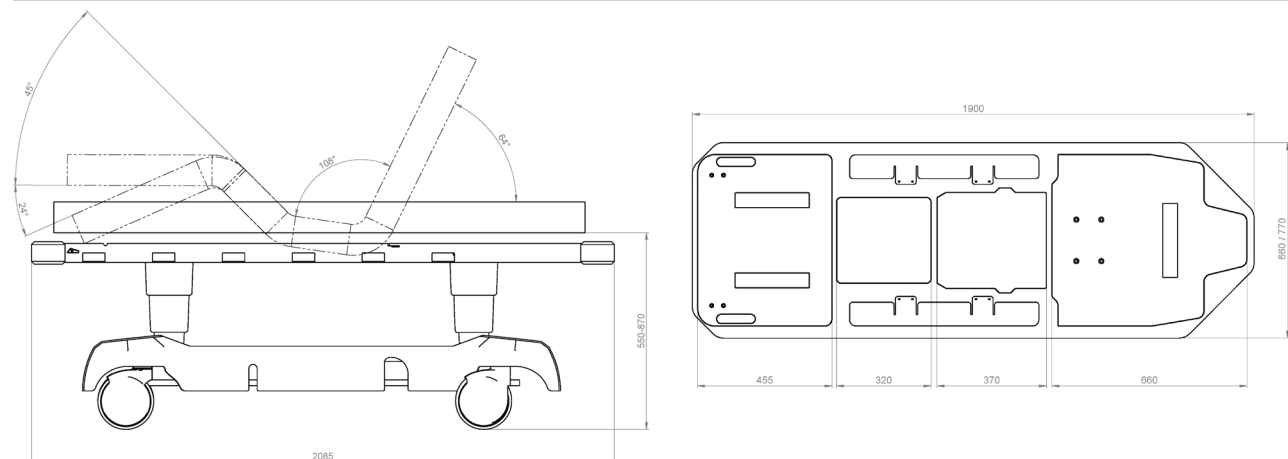



Wenn es um die Einrichtung und Ausrüstung von Spitälern, Praxen und Pflegeheimen geht, sind wir Ihr kompetenter Partner. Vom Standard bis zur spezifischen Kundenlösung bekommen Sie alles aus einer Hand.

Beratung / Entwicklung / Verkauf / Service



HESS Medizintechnik AG

Grabenstrasse 14
CH-8865 Bilten
T +41 55 619 20 80
info@hess-med.ch
hess-med.ch

