

Kinderspitalbett Bambino next

Entspricht der

EN-50637

Kinderbetten-Norm



DESIGN PROTECTED

H23-400 / H23.401

Kinderspitalbett Bambino next

Das Kinderspitalbett Bambino next vereint durchdachte Funktionalität, sichere Handhabung und modernes Design für den klinischen Alltag. In Zusammenarbeit mit führenden Kinderkliniken entwickelt, überzeugt das Bett durch seine hohe Anwenderfreundlichkeit und praxisorientierte Ausstattung.

Die gasfederunterstützten Seitengitter lassen sich beidseitig einhändig leicht und sicher bedienen, ohne dass das Kind Zugriff auf die Auslösung hat. Kopf- und fussseitig bieten herausnehmbare Polycarbonat-Scheiben jederzeit freie Sicht auf das Kind. Die Matratzenauflage besteht aus silberionenbeschichtetem HPL und ist besonders hygienisch und einfach zu reinigen. Das stufenlos verstellbare Kopfteil sowie der flüsterleise, zentral platzierte Antrieb mit Softstart/Softstop ermöglichen eine schonende Höhenverstellung. Die Steuerung erfolgt über einen abschliessbaren Handschalter, der sicher in einem verschliessbaren Fach verstaut werden kann. Das zuverlässige Bremssystem ist kugelgelagert, leichtgängig und in jeder Höhenlage zuschaltbar.

Das Bambino next ist in zwei Grössen erhältlich, MDR-konform, designgeschützt und steht für echte Schweizer Qualität.



qualitativ
hochwertiges
Schweizer Produkt



«HESS plus»
3 Jahre Garantie



ergonomisch



Service



CE-Konform



Polster wasserdicht



Schwerbrennbarkeit
nach DIN 53438


Basisausstattung für alle Modelle

Rollen achsweise blockierbar mittels leichtgängigem Fusspedal
Elektrisch leitfähige Kunststoffrollen, rostfrei, mit Fadenschutz
Seitengitter ohne Klemmstellen, leicht und sicher bedienbar
Rückenteil leichtgängig verstellbar mittels Gasfederunterstützung
Max. Patientengewicht 100 kg
Höhenverstellbereich 71 – 111 cm
Doppellenkrollen 125 mm
Wandabweiser an allen 4 Ecken




H23-400 / H23.401

Kinderspitalbett Bambino next

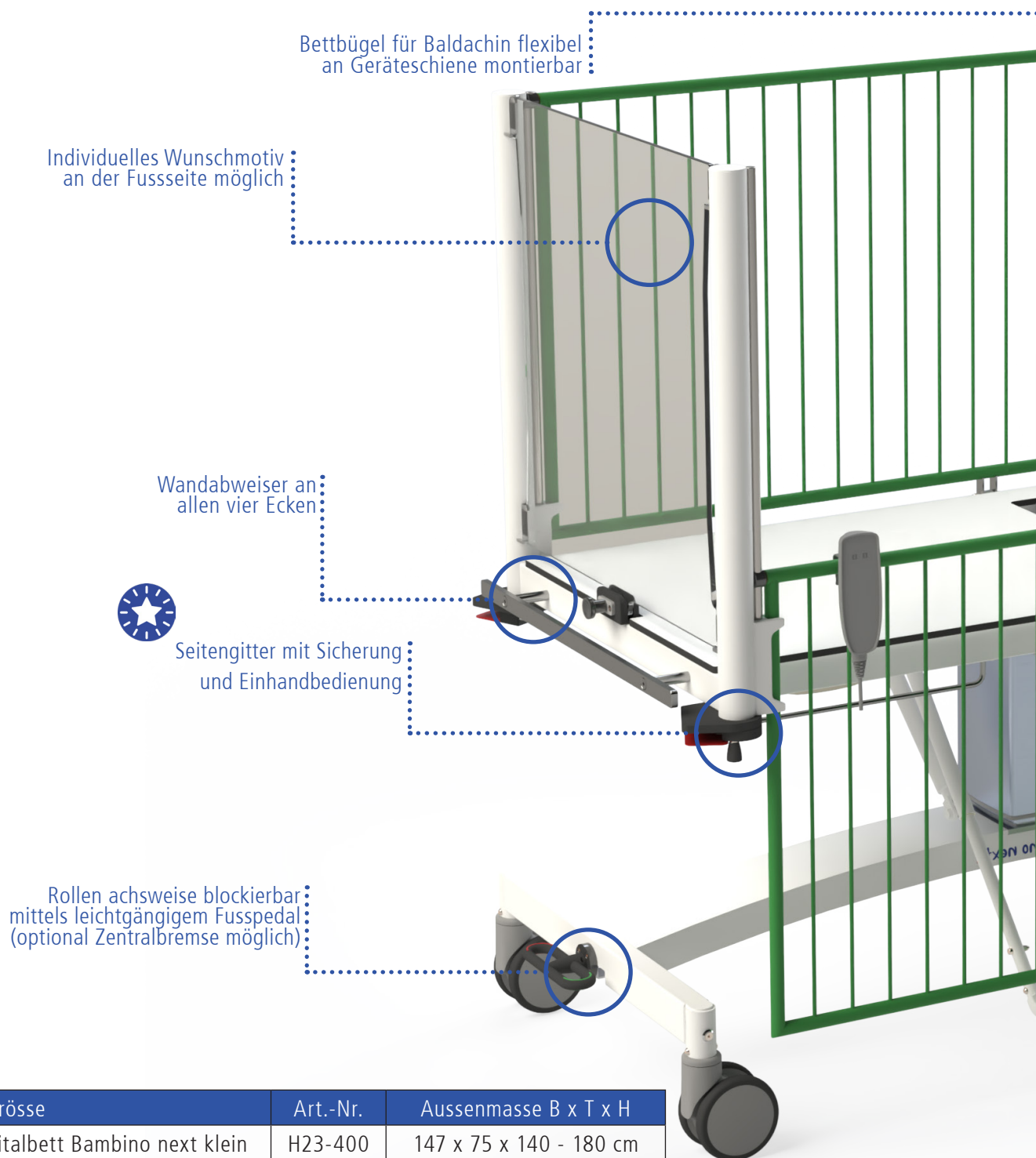

Gesamtgrösse	Art.-Nr.	Aussenmasse B x T x H
Kinderspitalbett Bambino next klein	H23-400	147 x 75 x 140 - 180 cm
Kinderspitalbett Bambino next gross	H23-401	159 x 75 x 140 - 180 cm

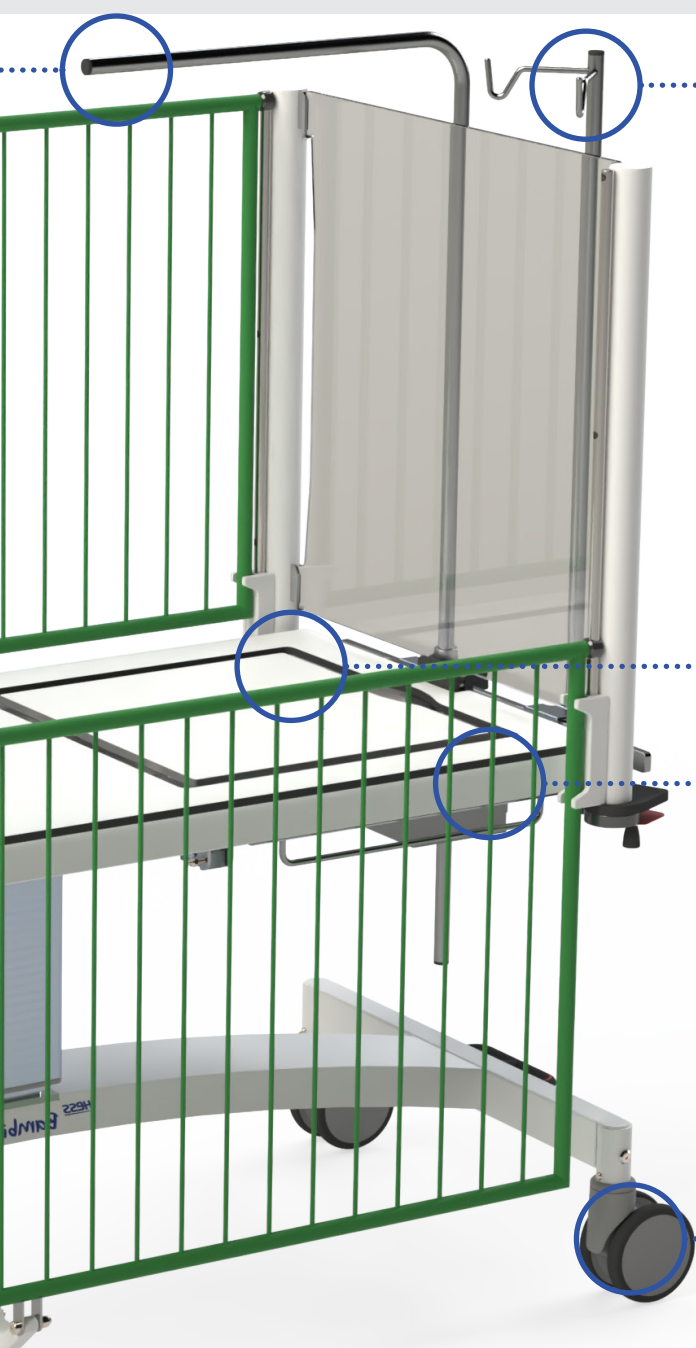

Infusionsständer flexibel an
Geräteschiene montierbar

Rückenteil leichtgängig verstellbar
mittels Gasfederunterstützung


Abschliessbares Fach für
den Handschalter




Elektrisch leitfähige Kunststoffrollen,
rostfrei, mit Fadenschutz




Optionen und Zubehör

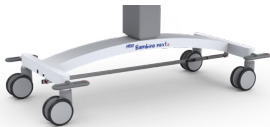


H23-400.501
4-seitiges Bremssystem

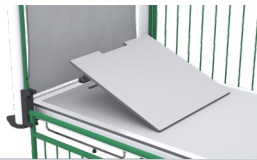


H23-400.502
Kopfteil hochstellbar

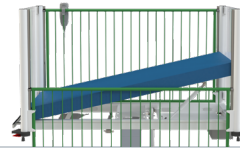


H23-400.503
Liegefläche hochstellbar

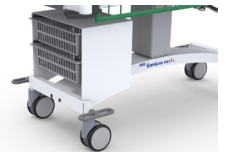

H23-400.511
Korpus fussteig inkl. ABS-Modulkörbe

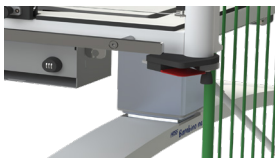

H23-400.512
Vierseitige Seitengitterauslösung

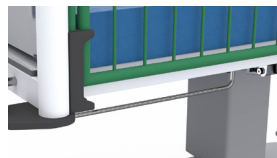

H23-400.509
Drainagenhalterung unter Liegefläche



H23-400.508
Bettbügel




H23-400.507
Infusionsstativ



H23-400.510
Kopf- und Fussblende aus HPL



H23-400.513/.514
Wunschmotiv Fussseite / Kopfseite

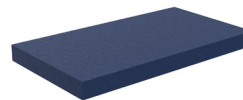

H23-400.410/.504
Komfortmatratze Kinder-spitalbett Bambino next



H23-400.515
Akkupaket



Technische Daten

Relevante Normen:




EN ISO 13485: 2016

EN 60601-1:2006/AC:210 /A1:2013/A12:2014/ A2:2021




EN 50637:2017

EN IEC 63000: 2018 (Berschränkung gefährlicher Stoffe)

H23-400 Kinderspitalbett Bambino next klein

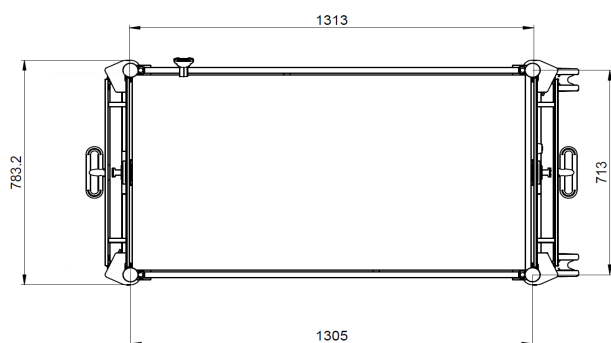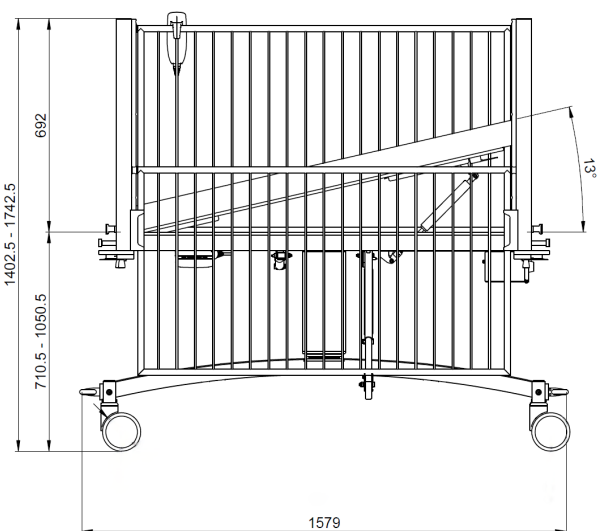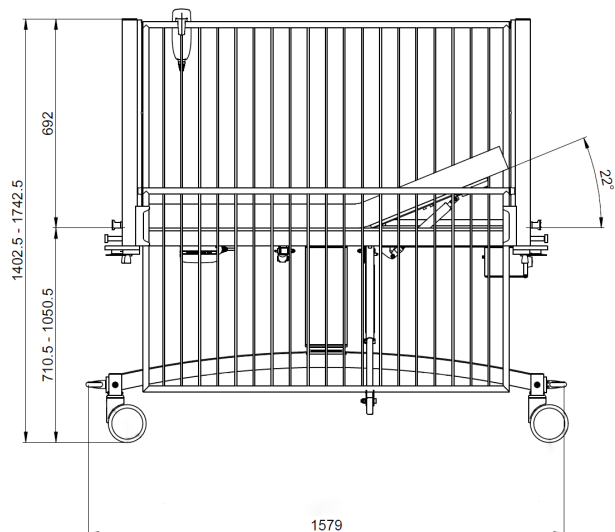

H23-401 Kinderspitalbett Bambino next gross

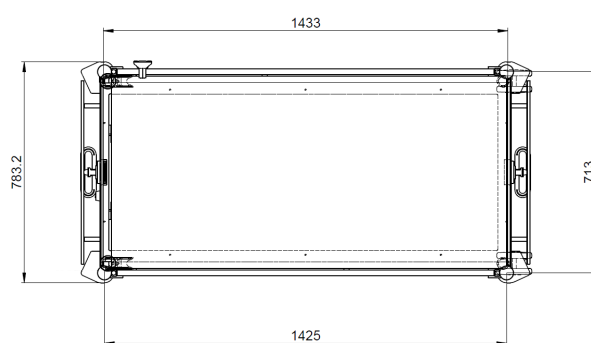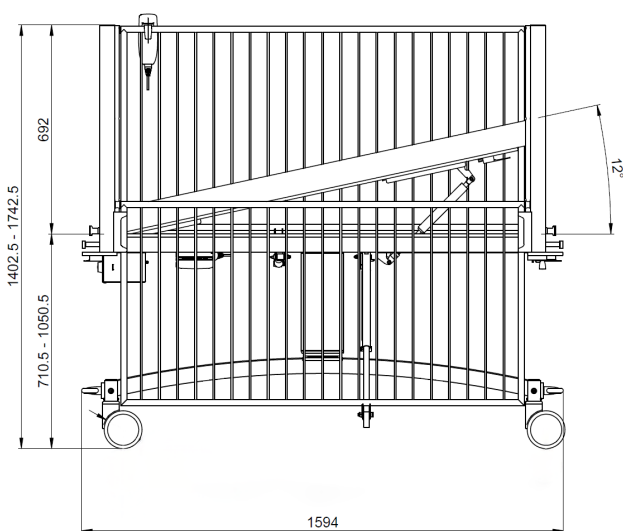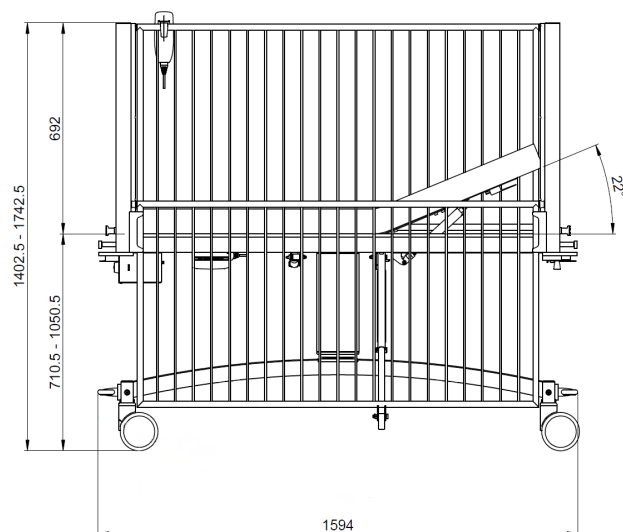



Wenn es um die Einrichtung und Ausrüstung von Spitälern, Praxen und Pflegeheimen geht, sind wir Ihr kompetenter Partner. Vom Standard bis zur spezifischen Kundenlösung bekommen Sie alles aus einer Hand.

Beratung / Entwicklung / Verkauf / Service



HESS Medizintechnik AG

Grabenstrasse 14
CH-8865 Bilten
T +41 55 619 20 80
info@hess-med.ch
hess-med.ch

